

フィジオテック社

マーモセット行動解析装置

KP-3000シリーズ

マーモセットの行動解析研究を目的とした認知課題に対応可能な装置です。

給餌装置（型番：KP-3100）は、ダイオードを利用して餌を排出します。実験施設の環境（室内の光度）に合わせたキャリブレーションが可能です。



給水装置（型番：KP-3200）は、ポンプを利用してマイクロ単位での給水が可能です。

飼育ケージに直接取り付けことができ、生理的環境下での認知課題が行えます。



給餌装置 KP-3100（左）

給水装置 KP-3200（右）

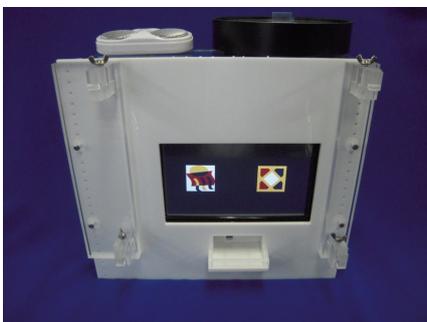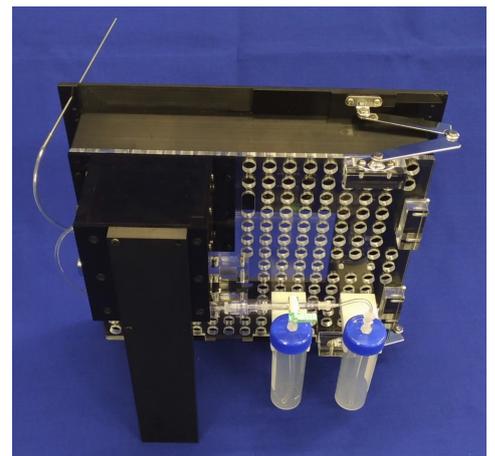

タスクに成功するとタッチパネル下部のエサ受けにエサが排出されます。

【仕様】

- エサ用フィーダー36穴（カスタムで拡張可能）（KP-3100）
- 5 μ l～300 μ lの給水範囲（KP-3200）
- 電源ケーブルは不要（パッドPCからのUSB供給によるフィーダー駆動の為）
- 各種7インチタッチモニタに対応したアダプタ
- 6時間以上のトレーニングに対応（拡張バッテリー使用時）
- 夏目製作所社製の飼育ケージに標準対応
- 総重量2Kg
- 初期トレーニング課題ソフト付属

201806

Physio-Tech

株式会社 フィジオテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3 岩本町163ビル4階
TEL: 03-3864-2781 FAX: 03-3864-2787
E-mail: sales@physio-tech.co.jp
Website: <http://www.physio-tech.co.jp>